




o v e s c o
innovation in scope



BougieCap.....

Para la dilatación de estenosis en el tracto digestivo superior

- Control óptico inmediato para una dilatación precisa
- Dilatación sencilla y efectiva con menos cambios de instrumentos
- Hasta un 99 % menos de residuos en comparación con la dilatación convencional¹

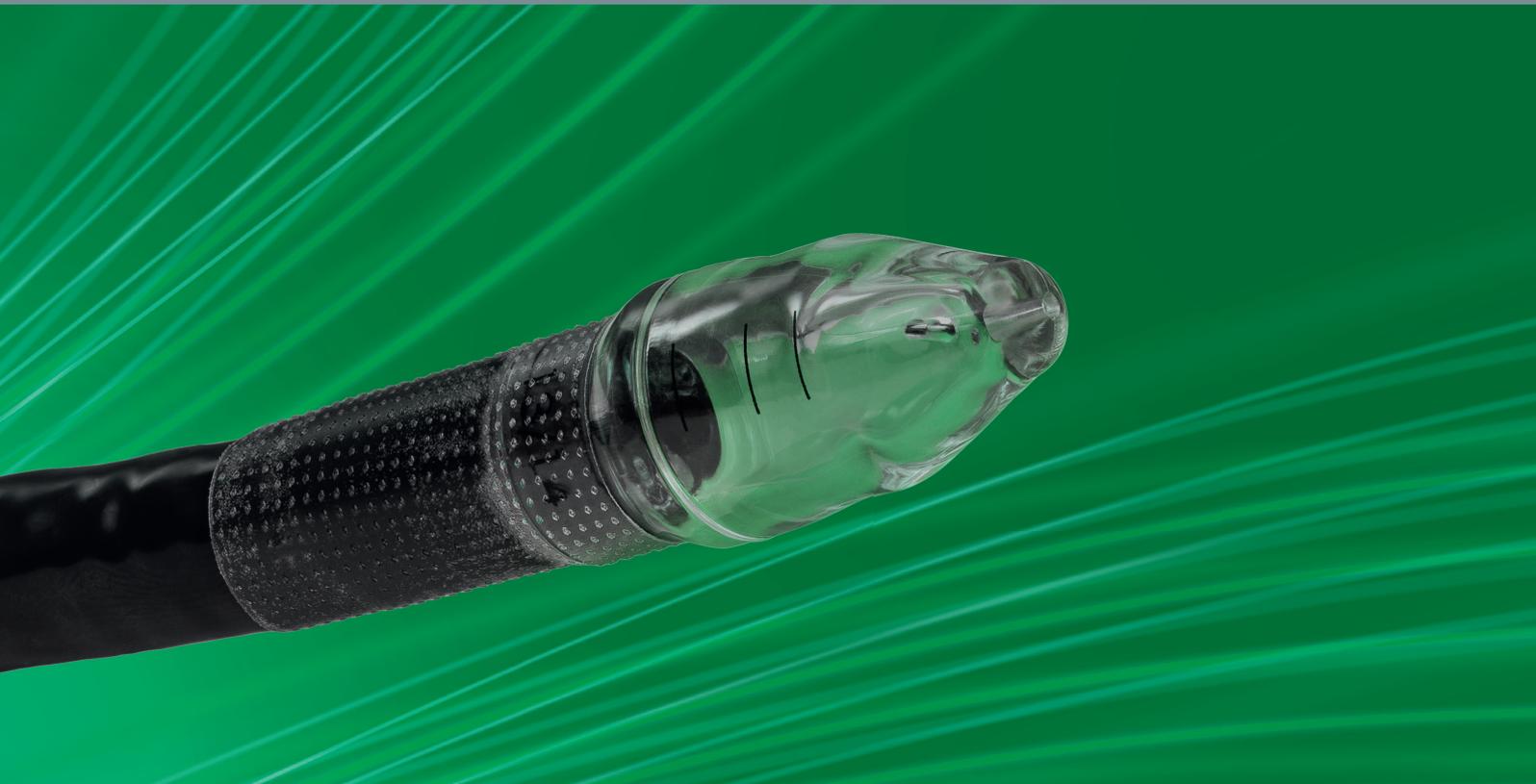



BOUGIE
CAP



Ovesco



BougieCap

Para una dilatación controlada y efectiva de estenosis en el tracto gastrointestinal superior

El BougieCap permite un control óptico inmediato durante la dilatación. Gracias al diseño en dos niveles, la dilatación se puede llevar a cabo de una forma excepcionalmente cuidadosa y precisa en pasos de un milímetro y se pueden evitar así las hiperextensiones.

La evaluación de la dilatación realizada se puede llevar a cabo de forma directa con el capuchón transparente colocado. Al no tener que cambiar tantas veces de instrumentos, este procedimiento ahorrará tiempo.


Los dos orificios distales laterales permiten la insuflación, la aspiración y el lavado. Un orificio central en la punta permite el uso del BougieCap con una guía (máx. 1 mm/0,038 in).

Versiones disponibles


BougieCap	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
Art. N.º	400.31.02	400.31.03	400.32.01	400.32.02	400.32.03	400.32.04
Diámetro del endoscopio [mm]	5,4–5,9			9,4–9,9		

Utilización


Estenosis esofágica

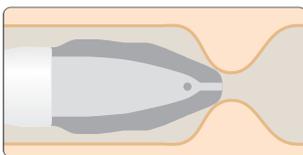

Guiado del endoscopio con el BougieCap colocado hasta la parte inmediatamente anterior a la estenosis.

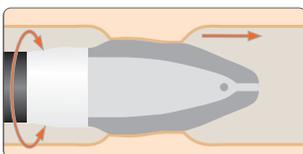

Avance cuidadoso hasta la primera meseta de dilatación con giros ligeros. Si es necesario, se continúa el avance hasta la segunda meseta.

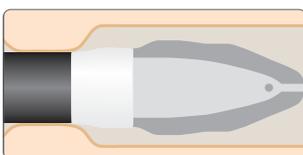

Paso correcto.



1 Yzet C, Figueiredo M, Michoud C, Lafeuille P, Rivory J, Pioche M. **Ecological impact of endoscopic dilatation using the bougie cap device: a low-tech innovation to reduce waste by 99 %.** Endoscopy. 2022; 10.1055/a-1838-3860.

2 Prof. Meining, Hospital universitario de Würzburg, Alemania.

Distribuido por:

Palex

Fabricado por:

Ovesco Endoscopy AG

Friedrich-Miescher-Strasse 9
72076 Tuebingen
Alemania

Telefon +49 7071 96528-160

Fax +49 7071 96528-260

E-Mail service@ovesco.com

Escanear aquí para más informaciones del producto.



La empresa **Ovesco Endoscopy AG** está especializada en productos sanitarios para la endoscopia flexible, la cirugía intraluminal y el diagnóstico telemétrico. Ovesco crea, produce y comercializa productos innovadores para el reconocimiento y el tratamiento de enfermedades del tracto digestivo. Los productos de Ovesco son sinónimo de eficacia y de utilización efectiva.

www.ovesco.com



Spanish version 7 | 2025-03-17