




**DESIGN
OTIMIZADO**

OTSG Xcavator[®]

Uma nova dimensão da preensão endoscópica

- Volume de preensão extragrande e alta força de preensão
- Universalmente aplicável para a remoção de tecidos ou corpos estranhos
- Canal de trabalho livre para uso simultâneo de outros instrumentos

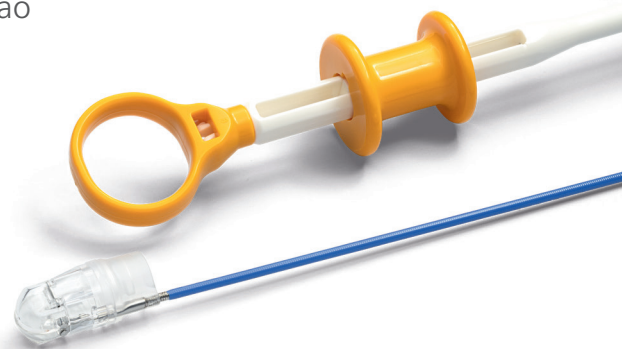

OTSG Xcavator®

A solução de grande volume para a remoção de tecidos e corpos estranhos de difícil acesso

A capacidade extragrande e a alta força de prensão do OTSG Xcavator® permitem a remoção simples e eficaz de tecido necrótico, coágulos sanguíneos, bolus de alimentos e corpos estranhos, enquanto as lâminas sem corte protegem o tecido saudável durante a prensão.

O controle externo da pinça deixa o canal de trabalho livre para capacidade adicional de sucção/irrigação e permite que ela seja combinada com outros instrumentos (por exemplo, laços, pinças etc.).

O design cônico permite a inserção endoscópica sem esforço e a aplicação através de um stent (Ø mín. 15 mm). Se necessário, pode ser usado um fio-guia adicional (Ø máx. 1 mm / 0,038 in.).



Detalhes e componentes de entrega

 OTSG XCAVATOR®	Diâmetro do endoscópio compatível Ø [mm]	Comprimento da haste [cm]	Mandíbula totalmente aberta Ø [mm]	Ângulo de abertura [°]	Unidade de embalagem [Peças]	Nº Art.
OTSG Xcavator®	9,5–10,5	165	23,4	145	2	200.15

O diâmetro externo máximo do instrumento montado depende do diâmetro externo real do endoscópio.


O OTSG Xcavator® aumenta o diâmetro externo total em aproximadamente 4–5 mm, para aproximadamente 14,3–15,5 mm.

Exemplo de aplicação



Remoção de tecido necrótico





Escanear aqui e
assistir ao vídeo
de aplicação!

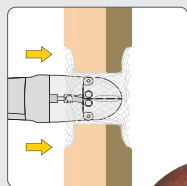



Introdução

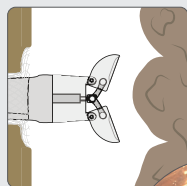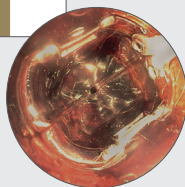


Abrir o OTSG Xcavator® e
agarrar o tecido.

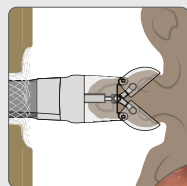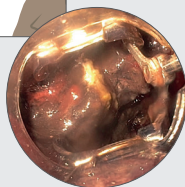

Retração através do stent.

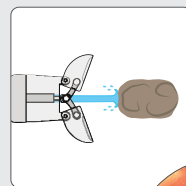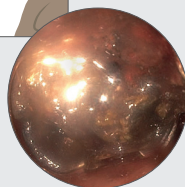

Remoção do tecido com a
ajuda de irrigação

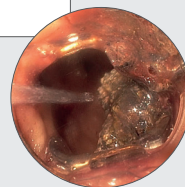

Fonte: PD Dr. Christoph Schlag, Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, Alemanha.



Ovesco Endoscopy AG

Friedrich-Miescher-Str. 9 | D-72076 Tübingen
+49 (0) 7071 96528-160 | service@ovesco.com

www.ovesco.com



Lynx Medical

Rua Narciso Sturlini, 302 | São Paulo – Brazil
Telefone +55 (11) 3682-4618 | vendas@lynxmedical.com.br

www.lynxmedical.com.br