



OPTIMIERTES  
DESIGN

# OTSG Xcavator<sup>®</sup>

Eine neue Dimension des endoskopischen Greifens

- Extragroßes Greifvolumen und hohe Greifkraft
- Universell einsetzbar zur Entfernung von Gewebe oder Fremdkörpern
- Freibleibender Arbeitskanal für simultane Nutzung weiterer Instrumente



# OTSG Xcavator®

Die großvolumige Lösung für die Entfernung von schwer greifbarem Gewebe und Fremdkörpern

Die extragroße Fassungskapazität und die hohe Greifkraft des OTSG Xcavator® ermöglichen eine einfache und effektive Entfernung von nekrotischem Gewebe, Blutkoagula, Nahrungsboli und Fremdkörpern. Das gesunde Gewebe wird durch die stumpfen Schaufeln beim Greifen geschont.

Durch die außenliegende Ansteuerung des Greifers bleibt der Arbeitskanal frei für zusätzliche Saug-/ Spülkapazität und erlaubt die Kombination mit weiteren Instrumenten (z. B. Schlingen, Greifer, etc.).

Das konische Design ermöglicht eine mühelose endoskopische Einführung sowie die Anwendung durch einen vorgelegten Stent (Ø min. 15 mm) hindurch. Bei Bedarf kann zusätzlich ein Führungsdraht (Ø max. 1 mm / 0.038 in) verwendet werden.



## Details und Lieferbestandteile



OTSG XCAVATOR®	Kompatibler Endoskop- durchmesser Ø [mm]	Schaftlänge [cm]	Vollständig geöffnete Maulteile Ø [mm]	Öffnungs- winkel [°]	Verpackungseinheit [Stk.]	Art.Nr.
OTSG Xcavator®	9,5–10,5	165	23,4	145	2	200.15

Der maximale Außendurchmesser des montierten Instruments ist abhängig vom tatsächlichen Außendurchmesser des Endoskops. Der OTSG Xcavator® vergrößert den Gesamt-Außendurchmesser um ca. 4–5 mm auf ca. 14,3–15,5 mm



## Anwendungen

### Pankreasnekrosektomie



Hier scannen und Anwendungs-video anschauen!

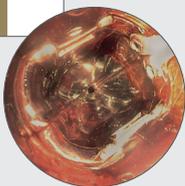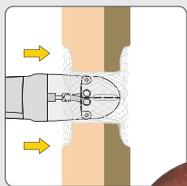



Einführung

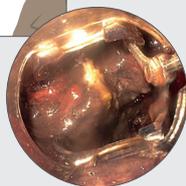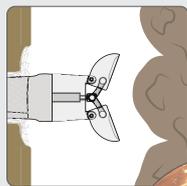

Öffnen des OTSG Xcavator®.

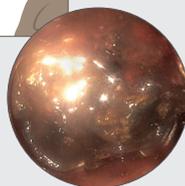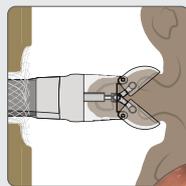

Greifen des Gewebes und Rückzug durch den Stent.

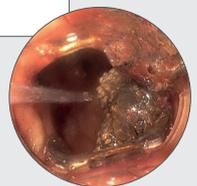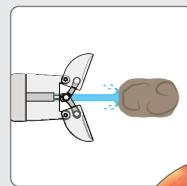

Entfernung des Gewebes mithilfe von Spülung.

Quelle: PD Dr. Christoph Schlag, Klinikum rechts der Isar, Technische Universität München, Deutschland.

OTSG Xcavator®\_FL\_deu\_Rev7\_2025-07-02\_800105  
Weitere Informationen und Produktdetails finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



**Ovesco Endoscopy AG**  
Friedrich-Miescher-Str. 9 | D-72076 Tübingen  
+49 (0) 7071 96528-160 | service@ovesco.com  
[www.ovesco.com](http://www.ovesco.com)