


▶ **NUEVO**



## ArgoCap™ .....

Facilita el tratamiento sencillo y preciso de la APC

- Sonda angulada para una mejor manipulación y accesibilidad del tejido
- Distancia de sonda constante gracias a una fijación segura
- Permite la APC con inyección sin cambiar de instrumentos

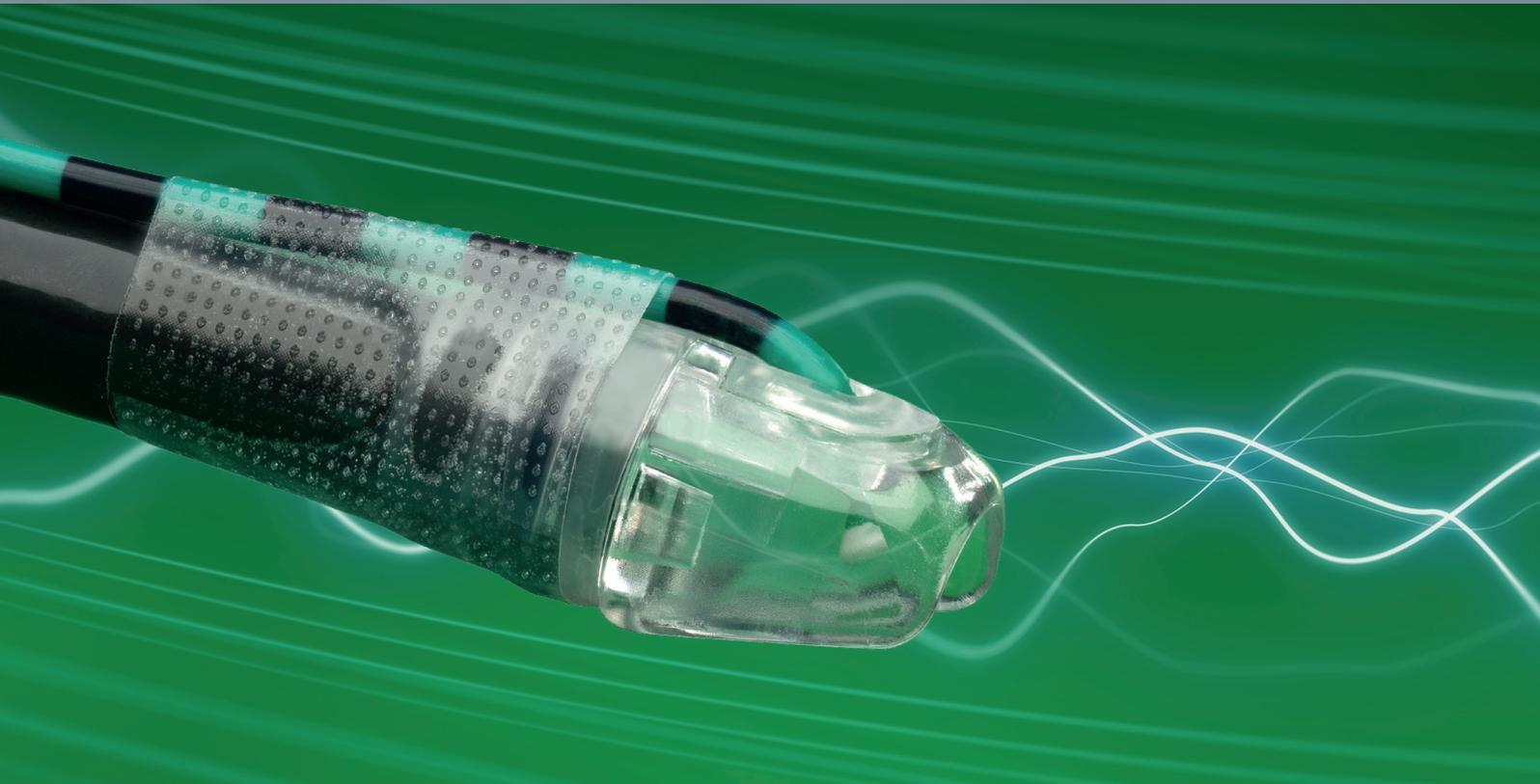



## ArgoCap™ (Art. N.º 200.52)


El ArgoCap™ es un capuchón endoscópico que facilita la ablación precisa durante el tratamiento con APC de lesiones superficiales en el tracto gastrointestinal.

El posicionamiento fijo de la sonda APC dentro del capuchón permite el guiado seguro de la sonda. La distancia constante de la punta de la sonda permite un tratamiento focalizado<sup>1</sup> bajo control visual.

El diseño especial del capuchón angula la sonda, facilitando su manejo durante el uso y el alcance de la zona a tratar, evitando así el exceso o la falta de tratamiento. Como la sonda se guía a lo largo del exterior del eje del endoscopio, el canal de trabajo queda libre para un instrumento adicional.

El ArgoCap™ es compatible con sondas APC con salida axial y un diámetro exterior de 2,3 mm.



### Dimensiones

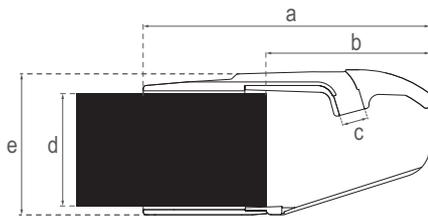


a Longitud total	28 mm
b Capuchón profundidad	16 mm
c Sondas compatibles Ø	2,3 mm
d Diámetro de endoscopio compatible	9,2–10,5 mm
e Diámetro exterior máx. Ø	15,5 mm

## Utilización


### Esófago de Barrett<sup>2</sup>

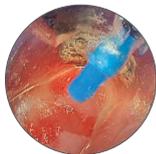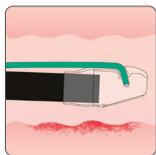



Inserción del endoscopio con el ArgoCap™ colocado

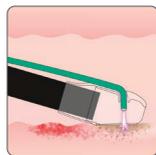

Localización de la zona a tratar e inicio del tratamiento con APC

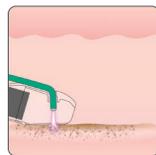

Tratamiento posterior con APC de los tejidos restantes

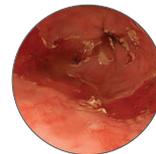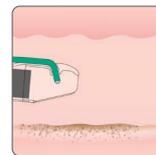

Tratamiento con APC satisfactorio, retirada del endoscopio

<sup>1</sup> Mueller J, Kayser G, Kuellmer A, Schiemer M, Bettinger D, Offensperger F, Thimme R, Schmidt A. **ArgoCap – feasibility and safety of a novel over-the-scope device to facilitate endoscopic APC treatment.** Minim Invasive Ther Allied Technol. 2023 Jun;32(3):103-111.

<sup>2</sup> Fuente: Prof. Dr. med. Benjamin Walter, Hospital Universitario Ulm, Alemania

Distribuido por:

**Izasa**  
**Medical**  
 by Paalex

Fabricado por:

Ovesco Endoscopy AG  
 Friedrich-Miescher-Strasse 9  
 72076 Tuebingen  
 Alemania

Teléfono +49 7071 96528-160  
 Fax +49 7071 96528-260  
 E-Mail service@ovesco.com

Escanear aquí para más informaciones del producto.

