




¡SecureCap ya  
está disponible  
por separado!

## FBR Set & SecureCap

Para una eliminación segura y eficaz de cuerpos extraños

- Dientes de cocodrilo y ratón en una pinza
- Capuchón largo y elástico
- Recogida segura de objetos punzantes

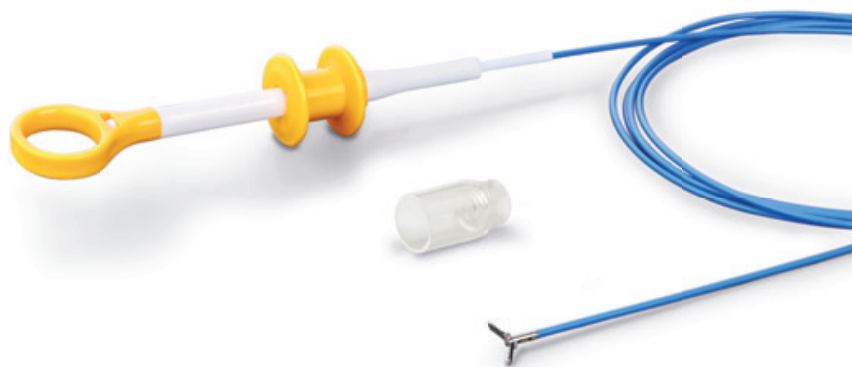


# FBR Set & SecureCap


El FBR Set es un kit de extracción de cuerpos extraños para la recuperación segura de diversos objetos extraños.


SecureCap es un capuchón de rescate elástico y transparente. Permite la extracción segura de cuerpos extraños en el tracto gastrointestinal.

El remOVE Grasper es una pinza para agarrar y extraer cuerpos extraños del tracto gastrointestinal. Cuenta con dientes de cocodrilo y ratón en las palas para un agarre firme y una fácil retirada del cuerpo extraño hacia el SecureCap.

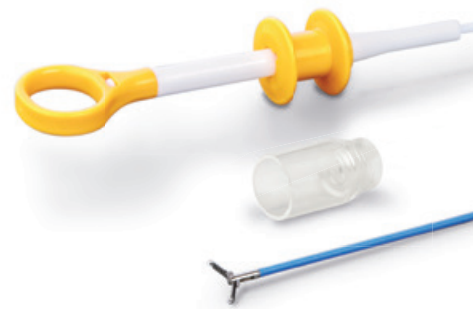


## Detalles y componentes incluidos en la entrega

 SECURE CAP	Diámetro compatible del endoscopio Ø [mm]	Diámetro exterior máximo [mm]	profundidad del capuchón [mm]	Unidad de embalaje [Unidad]	N.º de artículo
SecureCap 12	9,5–12	16,9	19,5	5	400.11
SecureCap 14	12–14	17	19,9	5	400.12

 FBR SET	Diámetro compatible del endoscopio Ø [mm]	Diámetro exterior máximo [mm]	profundidad del capuchón [mm]	Unidad de embalaje [Unidad]	N.º de artículo
SecureCap 12	9,5–12	16,9	19,5	2	400.05
	Diámetro del canal de trabajo compatible Ø [mm]	Longitud del vástago [cm]	Ancho de apertura	Unidad de embalaje [Unidad]	
remOVE Grasper	2,8	220	130°	2	

## Aplicaciones

Extracción de un fragmento de clip con el FBR Set.

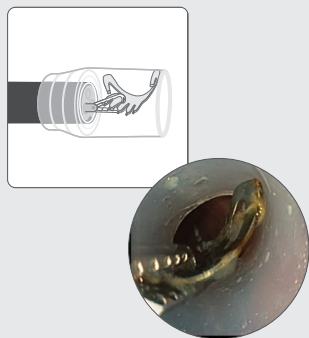

Introducción del endoscopio con el SecureCap acoplado y extracción del fragmento mediante una pinza.

Fuente: Prof. K. Caca, Clínica Ludwigsburg, Alemania

