


ArgoCap®


Pour rendre le traitement avec l'APC simple et précis

- Inclinaison de la sonde pour une manipulation facilitée et une meilleure accessibilité des tissus
- Distance constante entre la sonde et les tissues par fixation sécurisée
- Permet l'injection lors de la procédure sans changement d'instrument



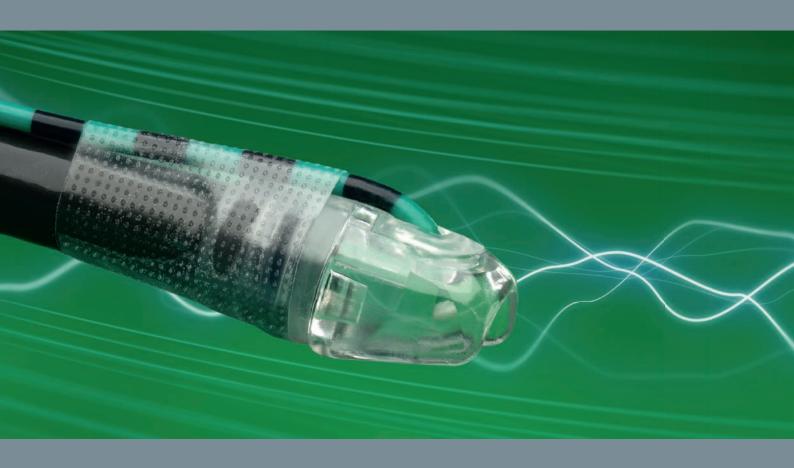



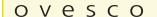



ArgoCap® (Réf. 200.52)


ArgoCap® est un capuchon endoscopique qui facilite le traitement par APC des lésions superficielles du tractus gastro-intestinal.

Le positionnement fixe de la sonde APC à l'intérieur du capuchon permet une orientation sûre de la sonde. La distance constante de l'extrémité de la sonde permet un traitement ciblé¹ sous contrôle visuel.

La conception spéciale du capuchon entraîne une inclinaison de la sonde qui facilite la manipulation pendant l'utilisation et l'accessibilité de la zone à traiter permettant d'éviter un sur ou sous-traitement. Comme la sonde est guidée à l'extérieur de l'endoscope, le canal opérateur reste libre pour l'utilisation simultanée d'un autre instrument.

L'ArgoCap® est compatible avec les sondes APC à sortie axiale et avec un diamètre extérieur de 2,3 mm.

Dimensions

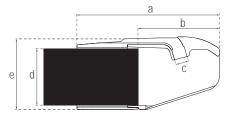

a Longueur totale	28 mm
b Profondeur du capuchon	16 mm
c Sondes compatibles Ø	2,3 mm
d Diamètres d'endoscope compatibles	9,2–10,5 mm
e Diamètre extérieur Ø	15,5 mm

Utilisation

Œsophage de Barrett²





Introduction de l'endoscope avec ArgoCap® monté





Localisation de la zone à traiter et début du traitement APC





Poursuite du traitement APC des zones tissulaires restantes





Traitement APC réussi, retrait de l'endoscope

2 Source : Prof. Dr. med. Benjamin Walter, Hôpital universitaire Ulm, Allemagne

Ovesco Endoscopy France SAS

99 avenue du 12 Février 1934 92240 MALAKOFF / Paris France

Téléphone +33 (0)1 46 12 90 58 +33 (0)1 41 48 52 24 order@ovesco.fr

Ovesco Endoscopy AG

Friedrich-Miescher-Strasse 9 72076 Tuebingen Allemagne

Téléphone +49 7071 96528-160 +49 7071 96528-260 Fax E-Mail service@ovesco.com

Scannez ce code QR pour plus d'informations sur le dispositif.



La société Ovesco Endoscopy AG est spécialisée dans la fabrication de produits médicaux destinés

www.ovesco.com



¹ Mueller J, Kayser G, Kuellmer A, Schiemer M, Bettinger D, Offensperger F, Thimme R, Schmidt A. ArgoCap – feasibility and safety of a novel over-the-scope device to facilitate endoscopic APC treatment. Minim Invasive Ther Allied Technol. 2023 Jun;32(3):103-111.