



NEUES
DESIGN

stentFIX System

Preventing stent migration^{1,2}

- Clip-Design für optimale Wandadaptierung
- Ermöglicht proximale und distale Fixierung
- Speziell konzipierte Kappe zur einfachen Positionierung



stentFIX System

Optimierte und einfache Stentfixierung

Das stentFIX System ist die innovative Lösung zur sicheren Fixierung von Metallstents (SEMS) und Lumen-Apposing Metal Stents (LAMS) im Verdauungstrakt. Das abgerundete Design des stentFIX Clip passt sich optimal an die gastrointestinale Anatomie an. Die speziell konzipierte Kappe ermöglicht eine einfache Positionierung auf dem Stentrand, sodass Stentmaschen und Gewebe optimal vom Clip erfasst werden können.

Das optimierte Design umfasst einen blauen Ring, der eine visuelle Bestätigung der Clipapplikation ermöglicht und das Verdrehen des Clips auf der Kappe während der Montage verhindert. Die größere Fläche des Handrads verbessert außerdem die Griffsicherheit bei der Applikation.

Dank seines kompakten Designs kann das stentFIX System auch durch Stents ab Ø 18 mm durchgeführt werden, so dass eine Fixierung, je nach Lage, sowohl am proximalen als auch am distalen Stentrand möglich ist.



Technische Spezifikationen


 STENTFIX SYSTEM	Fadenlänge [mm]	Kappentiefe [mm]	Kompatibler Arbeitskanaldurchmesser Ø [mm]	Kompatible Endoskopdurchmesser Ø [mm]	Max. Aussendurchmesser Ø [mm]	Art.Nr.
stentFIX System	1650	7	2,8	8,5–11	15,9	100.50n

1 Bronswijk M, Gökce E, Hindryckx P, Van der Merwe S. Single-session endoscopic ultrasound-directed transgastric endoscopic retrograde cholangiopancreatography with a dedicated over-the-scope fixation device: Feasibility study (with video). Dig Endosc. 2025 Feb;37(2):176-182.

2 Mehta A, Ashhab A, Shrigiriwar A, Assefa R, Canakis A, Frohlinger M, Bouvette CA, Matus G, Punkenhofer P, Mandarino FV, Azzolini F, Samaan JS, Advani R, Desai SK, Confer B, Sangwan VK, Pineda-Bonilla JJ, Lee DP, Modi K, Eke C, Schiemer M, Rondini E, Dolak W, Agarunov E, Duku M, Telese A, Pawa R, Pawa S, Velasco NZ, Farha J, Berrien-Lopez R, Abu S, McLean-Powell CK, Kim RE, Rumman A, Spaun GO, Arcidiacono PG, Park KH, Khara HS, Diehl DL, Kedia P, Kuellmer A, Manta R, Gonda TA, Sehgal V, Haidry R, Khashab MA. Evaluating no fixation, endoscopic suture fixation, and an over-the-scope clip for anchoring fully covered self-expanding metal stents in benign upper gastrointestinal conditions: a comparative multicenter international study (With Video). Gastrointest Endosc. 2025 Mar;101(3):589-597.

Anwendungsbeispiel

Proximale Fixierung des Stents³

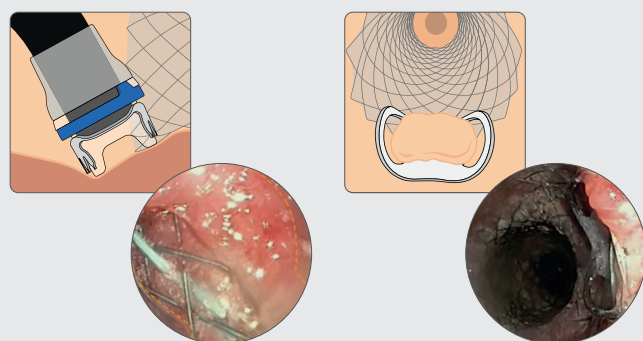

Zahnreihen des Clips parallel zur Stentöffnung ausrichten; Zu 1/3 auf Stentmaschen und 2/3 auf Gewebe positionieren. Gewebemobilisierung durch Saugung.

Optimale Adaptierung des Clips an die Wand.



Hier scannen und Anwendungsvideo anschauen!

3 Dr. Massimo Conio, Sanremo Hospital, Italien



Ovesco Endoscopy AG
Friedrich-Miescher-Str. 9 | D-72076 Tübingen
+49 (0) 7071 96528-160 | service@ovesco.com
www.ovesco.com

