




Fistelverschluss mit dem OTSC® System

Optimierte Technik zur Behandlung von GI-Fisteln

- reduzierte Gewebespannung um die Fistelmündung
- effektivere Gewebekomprimierung
- erhöhte Abheilungswahrscheinlichkeit der Fistel

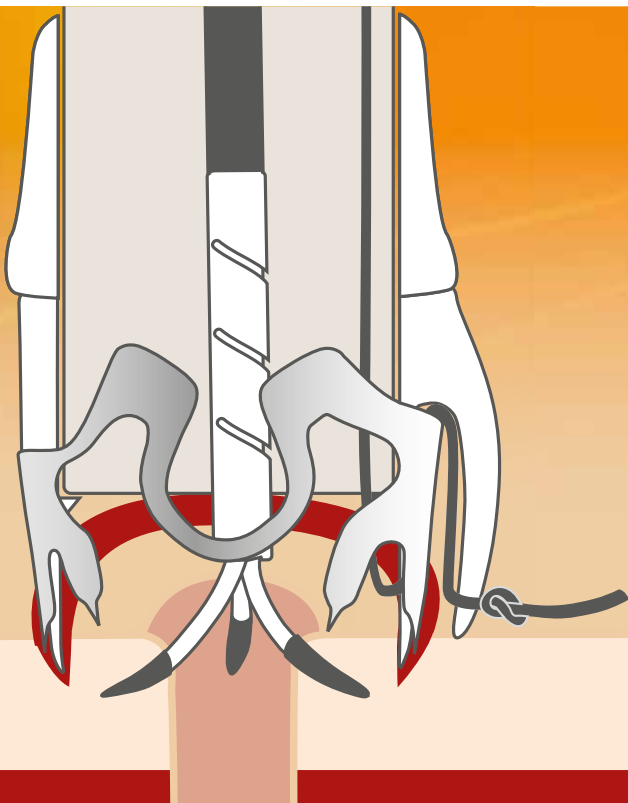



..... Optimierter Fistelverschluss

Neues Verfahren für den effektiveren Fistelverschluss mit dem OTSC® durch primäre oberflächliche Inzision der Mukosa an der Fistelmündung

Das OTSC® System wird bereits routinemäßig für die Behandlung von Fisteln angewandt und erzielt sehr gute Resultate. Bei fibrotischem Gewebe kann jedoch eine Clip-Applikation und damit der Verschluss des Fistelgangs erschwert sein.

Mit der neuen Fistelverschluss-Technik können ansonsten therapieresistente Fisteln durch primäre oberflächliche Inzision der Mukosa und darauffolgende OTSC-Applikation behandelt werden.


Dieses Verfahren bietet überzeugende Vorteile:

- Reduzierte Gewebespannung um die Fistelmündung
- Effektivere Gewebekomprimierung an der Fistelöffnung und dem darunterliegenden Fistelgang
- Frische Läsion durch Inzision erhöht die Abheilungswahrscheinlichkeit der Fistel


..... Anwendung



Mukosale Inzision (zirkulär)* um die Fistelöffnung mit dem AqaNife® (Ø~15 mm).

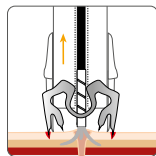


Platzierung des Clips in die Inzisionslinie.


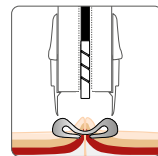


Applikation des Clips und Verschluss der Fistel.

klinisches Beispiel

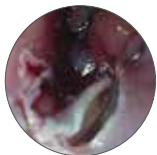

oberflächliche Inzision

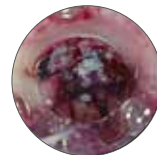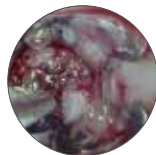

Quelle: Meinung A. et. al (2015) Erfolgreicher Verschluss einer großen ösophago-bronchialen Fistel durch mukosale Inzision vor OTSC-Klipp-Platzierung. Endoskopie heute 2015; 28 - V1

* Die Inzision darf nicht zu tief erfolgen, da sonst Perforationsgefahr besteht!

Ovesco Endoscopy AG
Friedrich-Miescher-Straße 9
72076 Tübingen
Deutschland

Telefon +49 (0) 7071 96528-160
Fax +49 (0) 7071 96528-260
E-Mail service@ovesco.com



Die **Ovesco Endoscopy AG** ist spezialisiert auf Medizinprodukte für die flexible Endoskopie und die endoluminale Chirurgie. Ovesco entwickelt, produziert und vertreibt innovative Produkte für die Behandlung von Erkrankungen im Verdauungstrakt. Die Ovesco-Produkte stehen für therapeutische Effektivität und effiziente Anwendung.

www.ovesco.com